

Axygen® 加长吸头

—— 身材更纤细，适合狭长容器移液

AXYGEN

A Corning Brand

您还在为存储在狭长储存管中的珍贵试剂或样本不能全部吸取出而困扰吗？您还在为移取染料时污染移液器而烦恼吗？是时候选择一款长吸头了。Axygen®加长吸头采用独特设计，身材更修长，更通透，与绝大多数移液器兼容；不仅适合一般性实验，更能满足高端移液需求。



产品特点

- ▶ 相比普通吸头更细长
- ▶ 能够深入普通吸头无法达到的特长或特窄容器的底部
- ▶ 带滤芯吸头能有效地阻止气溶胶
- ▶ 吸头表面带有刻度，轻松判断吸液/分液体积
- ▶ 严格控制的生产车间洁净度（可达10万级）
- ▶ 原材料符合美国FDA USP Class VI级别
- ▶ 供料系统采用中央控料，杜绝污染
- ▶ 无DNase，无RNase，无热原
- ▶ 可耐受高温高压灭菌（121℃，15分钟）
- ▶ 多种包装规格可选
- ▶ 适用于大多数主要品牌的移液器

使用10µL加长吸头吸取抗体(100µL/管，1mL管装)，可以直接吸到管底，并且由于吸头尖部细长，吸头外残留的抗体比普通吸头少许多。

200µL加长吸头吸取上样缓冲液或细胞染色液时，吸头长度保证移液器螺杆不被染色。

用200µL或1mL加长枪头吸取Matrigel®，可以吸到瓶底，节约试剂；并且吸头上端露于瓶口外，移液器螺杆不会接触瓶口，无污染。



图1. 用1mL加长吸头为小的细胞培养瓶（T25）直接换液，简单方便


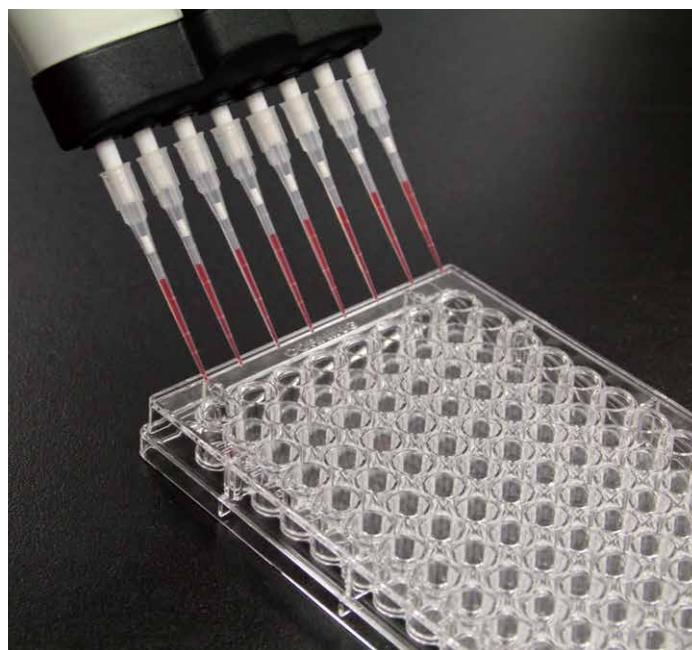


图2. 用10µL加长吸头进行微量移液，更准确


10 μ L 加长吸头

- ▶ 长达45mm，比普通吸头更长，适于微量移液，可以轻松接触试剂管/样品管管底
- ▶ 2 μ L、5 μ L和10 μ L处有刻度标记
- ▶ 最小移液量0.1 μ L
- ▶ 兼容绝大多数微量移液器

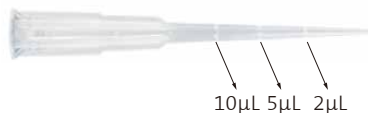


200 μ L 加长吸头

- ▶ 长达77.5mm，可以轻松接触容器底部，而不污染移液器移液轴。
- ▶ 10 μ L、50 μ L、100 μ L和200 μ L处有刻度标记
- ▶ 最小移液量1 μ L
- ▶ 兼容绝大多数微量移液器

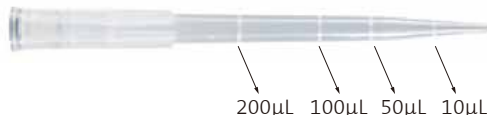

1000 μ L 加长吸头

- ▶ 长达102mm，可以轻松接触样品管管底，而不污染移液器移液轴。
- ▶ 200 μ L、500 μ L和1000 μ L处有刻度标记
- ▶ 兼容绝大多数微量移液器
- ▶ 深孔容器最合适

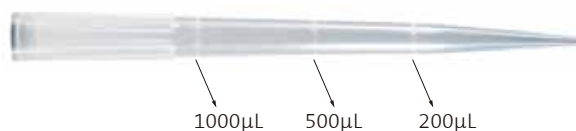

订购信息

货号	描述	包装规格
T-10XT-C	10 μ L 加长吸头，透明，袋装，未灭菌	1000支/袋，10袋/箱
T-10XT-C-R-S	10 μ L 加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，10盒/包，5包/箱
TF-10XT-C-R-S	10 μ L 带滤芯加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，10盒/包，5包/箱
T-200XT-C	200 μ L 加长吸头，透明，袋装，未灭菌	1000支/袋，10袋/箱
T-200XT-C-R-S	200 μ L 加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，10盒/包，5包/箱
TF-200XT-C-R-S	200 μ L 带滤芯加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，10盒/包，5包/箱
T-1000XT-C	1000 μ L 加长吸头，透明，袋装，未灭菌	768支/袋，10袋/箱
T-1000XT-C-R-S	1000 μ L 加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，8盒/包，5包/箱
TF-1000XT-C-R-S	1000 μ L 带滤芯加长吸头，透明，盒装，灭菌	96支/盒，8盒/包，5包/箱

CORNING

FALCON

AXYGEN

PYREX

☎ 400-600-0207

✉ ScientificSupportAP@corning.com

🌐 www.corning.com/lifesciences/china

🌐 www.cls-china.cn

🌐 www.cellculturesuccess.com

📺 优酷视频专辑：康宁生命科学

